


# Ringleidingversterker LA-60 en LA-215



## Audiomedia direct ontvangen op uw hoortoestel ...

... of via een comfortabele kinbeugel: Ringleidingversterker LA-60 en LA-215 voor de directe audio-ontvangst in kleine tot middelgrote ruimte, in de huiselijke omgeving of in kleine conferentiezalen.

HUMANTECHNIK – Uw partner  
voor audiologische producten

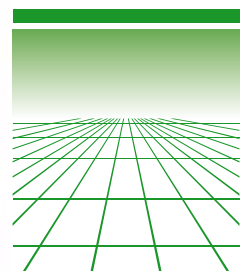

SMS



### Schakel om op ontspanning.

U zit in uw luie stoel. De klank van de HiFi-installatie, de radio of de televisie ontvangt u direct in uw hoortoestel of via de kinbeugel LPU-1. De geluiden van de omgeving verdwijnen op de achtergrond.

Op uw ringleidingversterker, LA-60 of LA-215, heeft u uw persoonlijke volume en uw favoriete klankbeeld ingesteld.



Het ringleidingkussen (bestelnr.: A-4910-0) – een compact alternatief voor het gebruik binnen een kleine ontvangstradius.

**LA-60** (bestelnr.: A-4213-0): van de ringleidingversterker voor het gebruik in kleine ruimtes



De ringleiding-ontvanger **LPU-1** (bestelnr.: A-4276-0), vederlichte kinbeugel als alternatief voor de ontvangst in het hoorapparaat



Laadstation voor LPU-1 (Bestelnr.: A-4977-0)

**LA-215** (bestelnr.: A-4223-0): comfortabel, flexibel in gebruik – de ringleidingversterker voor privégebruik en kleine conferentiezalen

Ringleidingversterker LA-60 en LA-215 voor kleine tot middelgrote ruimtes, in de woning of op het werk: uitstekende klank in uw hoorapparaat of via de kinbeugel.

Ringleidingversterkers sturen de audiosignalen van de aangesloten bronnen in een ringleiding. Afhankelijk van de grootte van de ruimte hebben deze »zendlussen« een verschillende omvang, van enkele centimeters tot meerdere meters. Hoorapparaten met een ingebouwde telefoonspoel (schakelaarpositie »T« resp. »MT«) of speciale ringleidingversterkers kunnen deze signalen ontvangen.

### LA-60

Voor het gebruik in kleine ruimtes tot 16 vierkante meter is de ringleidingversterker LA-60 het best geschikt. Hij beschikt over regelknoppen voor de kanaalkeuze en de individuele instelling van het

volume. Controlelampjes helpen bij de bediening met specifieke statussignalen. **Levering:** LA-60, ringleidingkabel (20 m), Scart-phono-kabel.

### LA-215

Voor het afdekken van een volledige woonruimte met inductieve audiosignalen of voor het gebruik in kleine conferentiezalen tot ca. 50 m<sup>2</sup> is de LA-215 een optimale oplossing. Naast de instelmogelijkheden voor basisvolume en klank ondersteunt deze versterker met Automatic Gain Control effectief de volumestabilisatie bij schommelend ingangsniveau. Door de digitale besturing kunnen bovendien twee audiobronnen aangesloten worden,

bijv. TV-toestel en HiFi-installatie. Met één toets kiest u telkens de gewenste bron. Naast de versterker wordt de LA-215 geleverd met:

- een microfoonkabel (4 m lengte),
- een kabel met directe aansluiting,
- de ringleidingkabel (37 m),
- Scart-phono-kabel.

### Ringleidingkussen

Een compact alternatief voor de luskabel vormt het ringleidingkussen voor de versterkers LA-60 en LA-215. Het ringleidingkussen wordt gewoon onder een stoelkussen of achter de kussens van een bank geschoven of aan de rugleuning van een stoel bevestigd. U bent in een handomdraai klaar voor ontvangst.



Uw hoortoestelspecialist geeft u uitgebreid en competent advies.